

# Manual de Instalação

## Passo a Passo – Instalação até Utilização

### 1º Passo - Instalação do Sensor

Fazer a instalação do dispositivo que será mantido dentro de um mecanismo semelhante ao da ilustração ao lado e armazenado no interior da geladeira, na posição que o círculo vermelho indica



\*IMAGEM ILUSTRATIVA DE UMA GELADEIRA COMUM\*



### 2º Passo - Confirmar Instalação

Verificar se o sensor já está captando a temperatura, utilizando o comando NPM START em sua máquina de instalação, para conectar ao nosso servidor PharmaTemp e iniciar a conexão e envio de dados.



\*COMPUTADOR USADO NA INSTALAÇÃO\*

# Manual de Instalação

## Passo a Passo – Instalação até Utilização

### 3º Passo – Cadastro do Usuário

Ao entrar em nosso site Institucional, você irá seguir para a aba de cadastro como ilustrada na imagem abaixo.




Ao clicar, você será redirecionado para a área de cadastro. É necessário que o usuário preencha todos os campos corretamente.

A screenshot of the 'CADASTRO' (Registration) form. The form is titled 'CADASTRO' in blue. It contains several input fields: 'Nome Completo', 'Data de Nascimento', 'CPF', 'E-mail', 'Telefone', 'Senha', 'Confirme a sua senha', and a dropdown menu labeled 'Selecionar Empresa que trabalha'. At the bottom of the form is a 'Cadastre-se' button. Below the button is a link that says 'Tem uma conta? Faca Login'.

Após fazer o cadastro, o usuário será redirecionado para a área de login.


# Manual de Instalação

## Passo a Passo – Instalação até Utilização

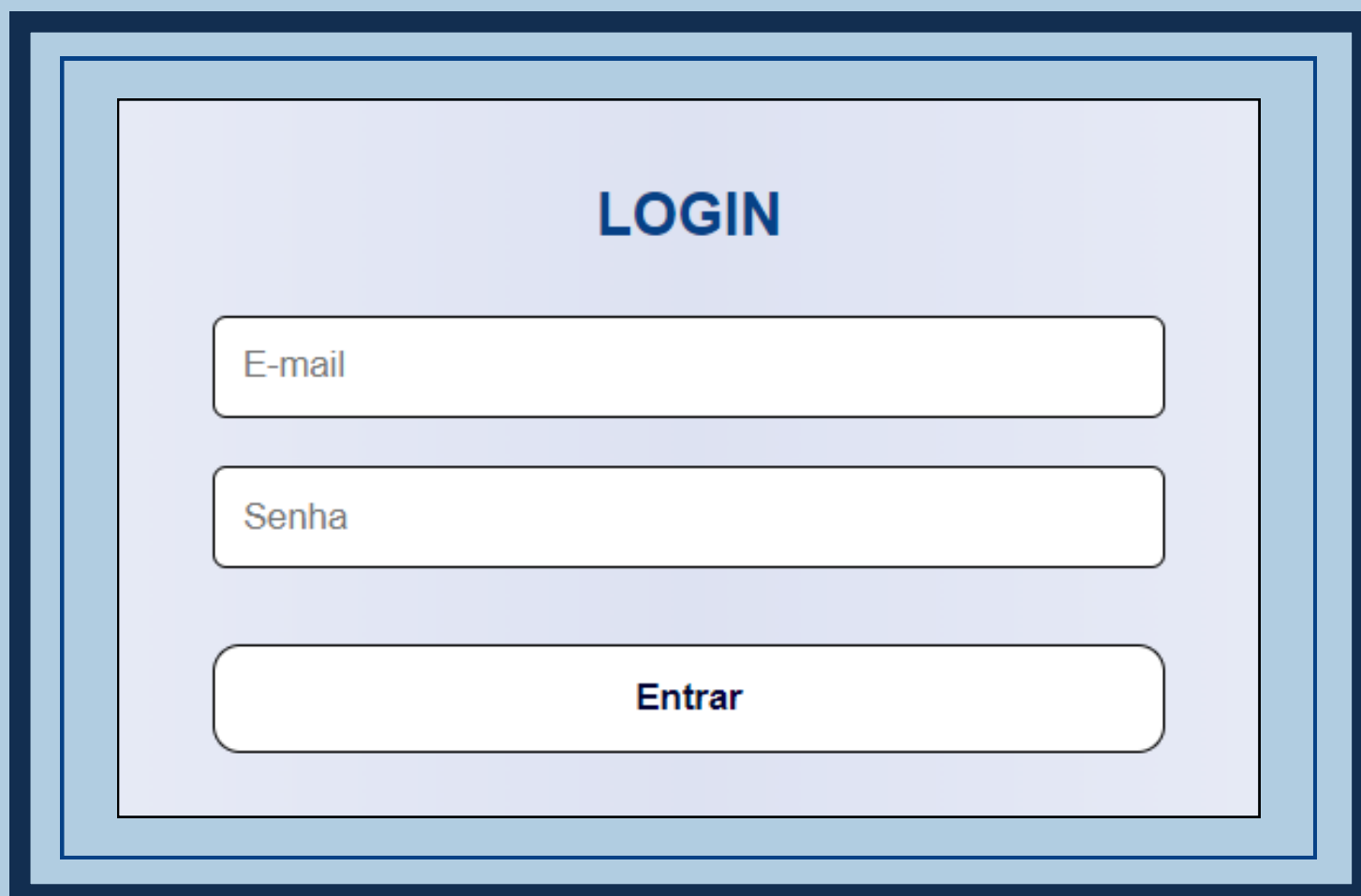

A mockup of a login screen with a light purple background. At the top center is the word "LOGIN" in bold blue text. Below it are three white input fields with rounded corners. The first field is labeled "E-mail", the second "Senha", and the third contains the text "Entrar" in bold blue font.

Colocando seu e-mail e sua senha cadastrados, será redirecionado automaticamente para a área de monitoramento.

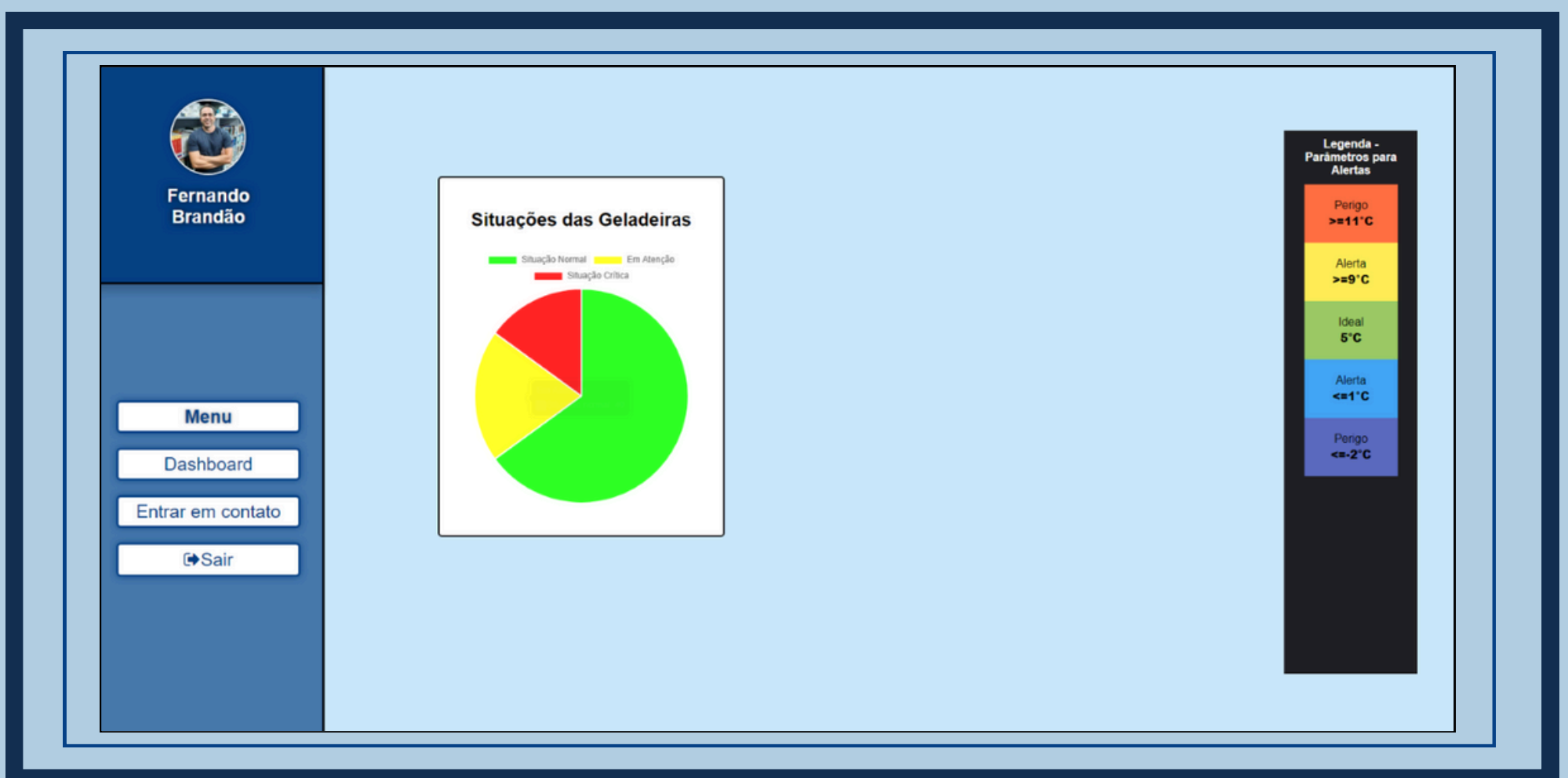

Ao lado esquerdo o usuário pode navegar entre as páginas principais da nossa Dashboard. O nome do usuário será sempre identificado no canto superior esquerdo juntamente com sua foto.

# Manual de Instalação

## Passo a Passo – Instalação até Utilização

### Guia página Dashboard

#### **MENU**

Mostra em um gráfico de setores a quantidade de geladeiras que a empresa monitora, divididas pelas condições que se encontram (Situação Normal, Em Atenção e Situação Crítica).

#### **Dashboard**

Mostra individualmente a temperatura monitorada de cada geladeira.

#### **Entrar em Contato**

Se o usuário sentir alguma dificuldade técnica no processo de utilização, ele pode utilizar nosso chat de inteligência artificial para sanar algumas dúvidas. Dentro desta página, você terá a opção de abrir um chamado para a equipe de suporte da PharmaTemp se o seu problema persistir.



# Manual de Instalação finalizado

Caso precise de mais algum tipo de ajuda nesse processo, entre em contato com os meios fornecidos abaixo.

## Meios de contato

**E-mail:**

support@pharmat  
empp.atlassian.net

**Telefone:**

(11) 91234-5678

**Comunicação:**

[https://pharmatempp.atlassian.net/  
servicedesk/customer/portals](https://pharmatempp.atlassian.net/servicedesk/customer/portals)